

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Οι Ρυθμιζόμενοι Νάρθηκες Ελεγχόμενης κίνησης είναι ορθοπεδικό κηδεμόνες και σταθεροποιητές αρθρώσεων που τοποθετούνται στην περιοχή των άνω ή κάτω άκρων. Ακίνητοποιεί, Εμποδίζουν ή Ελέγχουν την Κίνηση κατά τη Διάρκεια της Θεραπείας των Συνδέσμων ή Σταθερών Καταγμάτων.

Επιτρέπουν τον Έλεγχο Έκτασης από 0 έως 90° και Κάμψης από 0° έως 120°, σε βήματα των 10° ή 15°.

Εφαρμόζονται σε Κατάγματα, Μετεγχειρητικά και Παθολογίες όπου απαιτείται ο Έλεγχος της Κάμψης - Έκτασης της Άρθρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.
- Ο κηδεμόνας πρέπει πρώτα να συναρμολογηθεί και ρυθμιστεί από έναν ορθοπεδικό ή εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά την προσαρμογή του κηδεμόνα στον ασθενή πρέπει να τροποποιείται μόνο από ένα εξειδικευμένο προσωπικό.
- Ο κηδεμόνας είναι για έναν μοναδικό ασθενή καθώς πρέπει να έχει προσαρμοστεί ειδικά για αυτόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά από άλλους ασθενείς
- Η θεραπεία πρέπει να παρακολουθείται συχνά από έναν ειδικό. Εάν παρατηρήσετε οποιοσδήποτε παρενέργειες ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους ±3%.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς.
- Η τοποθέτηση του είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού.
- Η προσαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό υγείας
- Η συχνότητα & η διάρκεια χρήσης θα πρέπει να καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό.
- Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα πρέπει να ακολουθείτε πιστά την ημερήσια διάρκεια χρήσης του σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού ή του εξειδικευμένου προσωπικού υγείας.
- Για να πετύχετε ένα πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στο κατάλληλο μέγεθος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα ασθενή.
- Στα σημεία στήριξης με πίεση, το δέρμα δεν πρέπει να είναι τραυματισμένο ή υπερευαίσθητο.
- Μην φοράτε το προϊόν κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος.
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτα ασφαλής χρήση του προϊόντος.
- Ελέγχετε περιοδικά αν οι ιμάντες είναι τεντωμένοι και σε καλή κατάσταση (χωρίς λίπη, κοψίματα, σκισίματα, κλπ) και αν οι αγκράφες κλείνουν σωστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες καθαρισμού.

1. Να καθαρίζετε συχνά το προϊόν
2. Αφαιρέστε τις εμφανείς ακαθαρσίες πριν προχωρήσετε σε πιο λεπτομερή καθαριότητα.
3. Καθαρίστε τις σκληρές επιφάνειες με ένα νωπό πανί.
4. Τα υφάσματα του κηδεμόνα βγαίνουν εύκολα για να πλυθούν. Πλύνετε στο χέρι έως τους 30 °C.
5. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
6. Μην σιδερώνετε.
7. Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.
8. Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο
9. ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.
10. Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.
11. Συνιστάται ο καθαρισμός των αυτοκόλλητων βέλκρο για να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα, αφαιρώντας κλωστές, χνούδια, κλπ., που ενδέχεται να έχουν κολλήσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν παραδίδεται συναρμολογημένο και είναι έτοιμο για χρήση.

Η τοποθέτηση του είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού και πρέπει να γίνει από αυτόν ή από εξειδικευμένο προσωπικό υγείας.

INTENDED USE:

The Range of Motion Control Splints are orthopedic braces and joint stabilizers that are placed in the area of the upper or lower limbs. Immobilize, Block or Control Movement During the Treatment of Ligaments or Fixed Fractures. Allow the control of Extension from 0 to 90 ° and Flexion from 0 ° to 120 °, in steps of 10 ° or 15 °. They are applied in Fractures, Postoperative and in Pathologies where the Control of Flexion - Extension of the joint is required.

CAUTION (!):

- The use of the product is indicated only after doctor's prescription.
- The product requires assembly and prior adaptation by an orthopaedic technician or qualified personnel. After the orthosis has been adapted to a patient, it should only be modified by qualified personnel.
- The product is for single patient use, only given it must be specifically adapted to the said patient. Do not reuse on other patients.
- Monitoring must be frequently revised by the physician. If any secondary effects are noticed, inform the physician immediately
- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a ± 3%. Deviation for the Dimensions of the Products.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

GENERAL SAFETY WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Its application is the sole responsibility of the treating physician.
- The Customization of the product must be done by qualified health personnel.
- The frequency & duration of use should be determined by the treating physician.
- For maximum effectiveness you must respect the daily usage duration according to the instructions of the treating physician or specialized health personnel.
- To ensure the full therapeutic effect, you must use the correct size.
- This product is intended to be used by one patient only.
- In pressure bearing areas, the skin must not be injured or hypersensitive.
- Do not wear the product while having a bath or a shower.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

BEFORE EVERY USE:

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product.
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Always check the condition of wear for the parts to ensure the absolute safe use.
- Regularly check that the straps are tense and in good condition (free of grease, cuts, tears, etc.) and that the buckles fasten well.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

MAINTENANCE, CLEANING & DISINFECTION INFORMATION:

To guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these cleaning procedures.

1. Clean the product frequently.
2. Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate cleaning.
3. Clean the hard surfaces with a damp cloth.
4. The fabric parts of the product are easily removed allowing them to be washed. Wash in hand at a maximum of 30 °C.
5. Do not use bleach.
6. Do not iron.
7. Do not dry clean.
8. Do not tumble dry.
9. DO NOT leave the product wet.
10. If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
11. It is recommended to careful cleaning of the Velcro and to eliminate threads, lint, etc., and thereby preserve correct adhesive properties.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

The product is assembled and ready for use.

It's fitting and application is the sole responsibility of the treating physician and must be done by him or by specialized health personnel.

Μήκος (τηλεσκοπικός εξοπλισμός)

Για τον Αγκώνα: Χαλαρώστε όλους τους ιμάντες και τοποθετήστε τον κεντρικό άξονα του προϊόντος πάνω στην άρθρωση (εξωτερικό μέρος του αγκώνα) για να ρυθμίσετε το κατάλληλο μήκος του κηδεμόνα. Για να ρυθμίσετε το μήκος του κηδεμόνα, πιέστε τα κουμπιά πάνω στα καπάκια για να ελευθερώσετε και να μακρύνετε ή να κοντύνετε μέχρι να επιτευχθεί το κατάλληλο μήκος.

Το κάτω μέρος του κηδεμόνα πρέπει να φτάσει μέχρι τον καρπό και το πάνω μέρος έως την αρχή της μασχάλης χωρίς να προκαλεί ενόχληση.

Ασφαλίστε και σταθεροποιήστε με τους ιμάντες.

Αν χρειάζεται κόψτε τους ιμάντες, πρώτα απομακρύνετε το περιφερικό αυτοκόλλητο βέλκρο, κόψτε και τοποθετήστε το ξανά όταν τελειώσετε. Οι πλαϊνοί ράβδοι πρέπει να προσαρμόζονται στην περίμετρο του βραχίονα. Η προσαρμογή πρέπει να γίνει εφόσον έχει ρυθμιστεί πρώτα το επιθυμητό μήκος.

Εφαρμόστε το δακτυλίδι τύπου "D" στον πλησιέστερο στον καρπό ιμάντα. Τοποθετήστε τον ιμάντα στήριξης στον αντίθετο, από το τραυματισμένο χέρι, ώμο, κατά μήκος της πλάτης & κάτω από αυτόν. Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να στερεώσετε τον ιμάντα στον νάρθηκα. Ρυθμίστε το κατάλληλο ύψος.

Για το Γόνατο: Τοποθετούμε πρώτα τους τέσσερις ιμάντες. Τον πρώτο στο πάνω μέρος του μηρού, το δεύτερο πάνω από την επιγονατίδα, τον τρίτο κάτω από το γόνατο και τον τέταρτο στο κάτω μέρος της κνήμης. Οι ιμάντες τοποθετούνται εφαρμοστά, αλλά όχι πολύ σφιχτά γιατί διακόπτουν την κυκλοφορία του αίματος.

Στη συνέχεια τοποθετούμε τις πλευρικές ράβδους, ρυθμίζουμε το μήκος πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Οι ράβδοι αυτοί προσκολλώνται στους ιμάντες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο μηρό και στην κνήμη. Σταθεροποιήστε δένοντας όλους τους ιμάντες ξεκινώντας από την περιοχή κοντά στο γόνατο.

Περιορισμός της κάμψης-έκτασης (άρθρωση):

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να ρυθμίσετε τις μοίρες περιορισμού που έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός και ασφαλίστε με τα δεματικά που περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Η θέση "0" αντιστοιχεί στην πλήρη Κάμψη ή Έκταση.

Για λόγους υγιεινής και άνεσης συνιστάται η χρήση ενός βαμβακερού ενδύματος, ιδανικά χωρίς ραφές, κάτω από τους νάρθηκες.

REF.:	ΕΚΤΑΣΗ / EXTENTION	ΚΑΜΨΗ / FLEXION	ΜΗΚΟΣ - LENGTH
0807669	0 - 90°	0 - 120°	58,5 - 73cm
0808306	0 - 90°	0 - 120°	34 - 43,5cm
0808307	0 - 90°	0 - 120°	34 - 43,5cm

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date. The warranty apply on factory defects & DOES NOT apply on damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT apply on the parts, that can wear out during use or over time. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty. No service or spare part is applied unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the end user- customer or by the dealer.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / WARRANTY FORM:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / BUYERS DETAILS:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ FULL NAME:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ PURCHASING DATE:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
LOT OR SERIAL NUMBER:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ / DEALER DETAILS	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / FULL NAME:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / SIGN AND SIGNATURE	

Ερμηνεία συμβολών που βρίσκονται στην ετικέτα στο χαρτοκιβώτιο ή & στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, master carton and or user manual

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MANUFACTURER	 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT NUMBER	 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ READ THE INSTRUCTION FOR USE
 ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE CE MARK	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PRODUCTION DATE	 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MEDICAL DEVICE
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ BATCH NUMBER	 ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED	 Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification
 ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ IN DOOR USE ONLY	 ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ HANDLE WITH CARE	 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE

Length (telescopic device):

For the Elbow: loosen all the straps and hold the hinge up to the external epicondyle (external part of the elbow). To adjust the length of the brace, press the locks to release them, then lengthen or shorten as required.

The lower part of the brace should reach the wrist while the upper part should be as close to the armpit as possible without causing irritation.

Secure and secure with straps.

If the straps require shortening, remove the distal Velcro first, trim, then return it to its position. The lateral side bars must follow the contour of the arm. Side bars may be bent to fit individual anatomies. Note side bars must be bent with final length adjustment completed and bent with bending irons


Attach the D-ring to the strap closest to the wrist. Place the neck strap over the opposite shoulder of the injured arm and across the back and under the unharmed arm. Use the clip to attach the free end of the neck strap to the brace. Adjust the height to comfortable position

For the Knee: We first install the four straps. The first at the top of the thigh, the second above the patella, the third below the knee and the fourth at the bottom of the tibia. The straps are placed tightly, but not too tightly because they interrupt blood circulation. Then we place the side bars, and we adjust the length by pressing the button. These bars adhere to the straps already placed on the thigh and tibia. Secure and fasten all straps starting with the straps closest to the knee.

Limitation of joint flexion/extension (articulation-joint):

Press the button to adjust the degrees of restriction indicated by the physician and secure with the tire-up that are included in the package. The "0" lock setting are used to lock the brace in full Flexion or Extension.

For hygiene and comfort, it is recommended to wear a cotton garment, preferably seamless, underneath the brace.

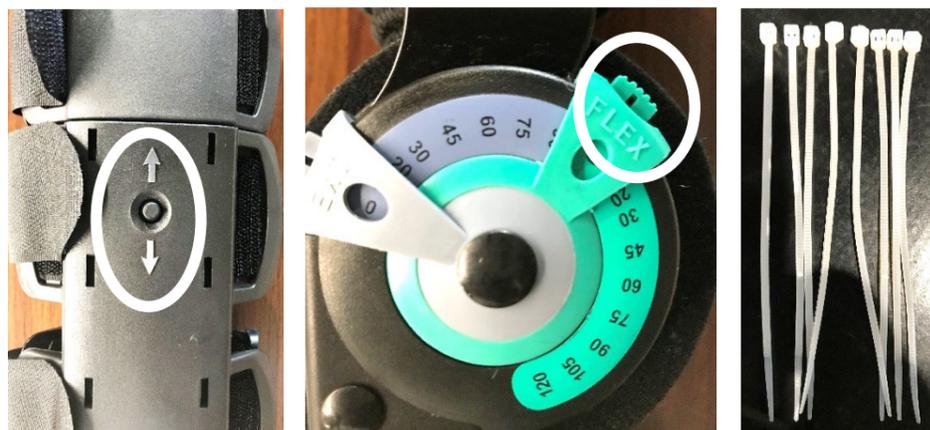

REF.:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	EN DESCRIPTION	GTIN-14
0807669	ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ (U)	TELESCOPIC ROM KNEE BRACE, UNIVERSAL	05213006901379
0808306	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ	ELBOW BRACE ROM LEFT, TELESCOPIC	05213006901270
0808307	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΔΕΞΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ	ELBOW BRACE ROM RIGHT, TELESCOPIC	05213006901287

